



## CARLO Classic (Aluminium)

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,  
Umlagern und Transfer von Patienten und Bewohnern

# Gurtlifter CARLO Classic (Alu)

die effektive Entlastung in der täglichen Pflege ...

Das Heben und der Transfer von pflegebedürftigen Menschen, die sich nicht selbst stützen können oder gänzlich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, stellt in der täglichen Pflege eine große Herausforderung dar ...

## Leichte Aluminiumbauweise - elektrische Höhenverstellung

Der CARLO Classic L zeichnet sich durch seine extrem leichte und sehr stabile Aluminiumbauweise aus. Der Auslegearm mit 4-Punktbügel lässt sich mittels Handbedienteil bis zum Boden abgesenken und gewährleistet somit eine sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch nur eine Pflegekraft. Das Fahrgestell lässt sich elektrisch spreizen und schliessen und bietet somit einen hohen Bedienkomfort. Aufgrund der geringen Höhe des Fahrgestells können mit dem CARLO Classic L problemlos sowohl Badewannen als auch Pflegebetten unterfahren werden. Der Gurtbügel kann mittels einer unkomplizierten Arretiervorrichtung sicher in Fahrtrichtung fixiert werden.

## Ergonomisches und effektives Arbeiten

Der mobile Gurtlifter CARLO Classic L unterstützt Ihr Pflegepersonal optimal und zuverlässig bei allen täglichen Hebe- und Transferroutinen und ermöglicht jederzeit ein ergonomisches,

sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belastung des Bewegungsapparates durch manuelles Heben und Umlagern des Bewohners.

## Ein Maximum an Sicherheit und Komfort

In Kombination mit der großen Auswahl von verschiedensten, hochwertigen Schlaufengurten ist der CARLO Classic L (Alu) in allen Pflegebereichen universell einsetzbar. Neben dem Heben und Umlagern des zu Pflegenden ist der Alulifter auch für den Toilettengang, das Baden oder das Duschen das ideale Hilfsmittel. Er lässt sich problemlos individuell an den pflegebedürftigen Menschen anpassen, unabhängig von dessen Körpergröße, Körpergewicht, Altersgruppe oder körperlicher Einschränkung und bietet dem Bewohner und Patienten dadurch jederzeit die richtige Unterstützung, höchste Sicherheit und ein Maximum an Komfort.



Das Fahrgestell des Alulifters CARLO Classic ist so konzipiert, dass Pflegebetten und Badewannen problemlos unterfahren werden können.




Sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch nur eine Pflegekraft.

(Diese Abbildung zeigt die optionale, digitale Patientenwaage)

Der CARLO Classic L (Alu) erlaubt die sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch eine einzelne Pflegekraft. Der CARLO Classic L Gurtlifter überzeugt zudem durch höchste Qualität und Bedienerfreundlichkeit ...

## Vorteile für Ihre Pflegekräfte

- Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus 100% Aluminium, 100% recyclebar
- Extra wendig und leicht zu fahren
- Elektrische Höhenverstellung, elektrisch spreizbar
- Universell einsetzbar auch zum Duschen und Baden
- Ständiger direkter Kontakt zum Bewohner, da viele Funktionen elektrisch über das Handbedienteil gesteuert werden
- Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- Handbedienteil mit Anzeige des Ladezustandes des Akkus, Fehlerdiagnose und Service
- Alle Aufgaben des Hebens und Transfers können in der Regel von einer einzelnen Pflegekraft allein ausgeführt werden
- Optionale Patientenwaage

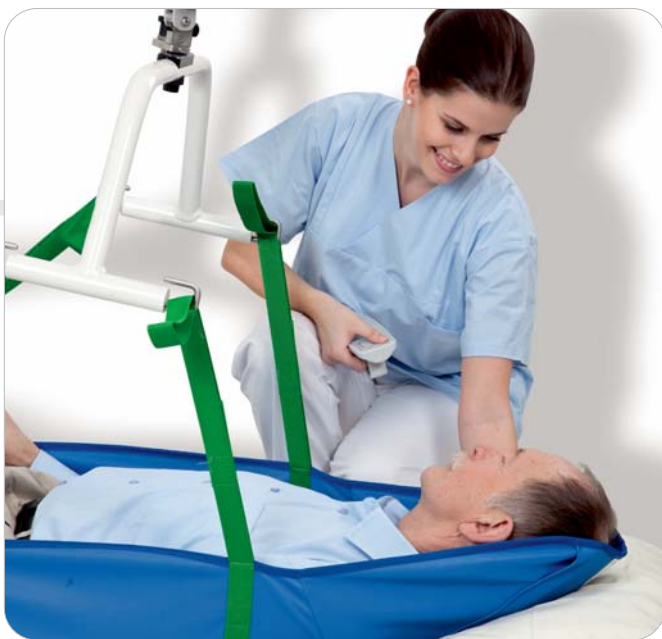

4-Punktbügel mit Schlaufenaufhängung und zusätzlicher Arretiervorrichtung zur Fixierung in Fahrtrichtung.

## Vorteile für Ihre Bewohner

- Keine verunsichernden Pendel- oder Schwingbewegungen, während des Hebens oder Transfers
- Bestmögliche Wahrung der Würde des Bewohners, da die täglichen Pflegeroutinen von einer einzelnen Pflegekraft ausgeführt werden können und kein Team von Pflegekräften erforderlich ist
- Alle täglichen Pflegeroutinen, insbesondere sicheres Duschen können mit Hilfe des CARLO Classic L bequem ausgeführt werden
- Der Bewohner erhält das wichtige Gefühl der Sicherheit, da ein ständiger enger Kontakt zur Pflegekraft besteht
- Große Auswahl an Komfort-Schlaufen-Gurten in unterschiedlichen Größen für individuelle Anforderungen



Bequemer und sicherer Transfer, inklusive Fixierung der Bügelposition in Fahrtrichtung. Eine optimale Beinfreiheit ist jederzeit gewährleistet.

## Technische Daten

<b>Max. Patientengewicht</b>	185 kg
<b>Fahrgestell</b> (Länge x Höhe)	1.290 mm / 120 mm
<b>Breite innen</b> (geschlossen/gespreizt)	580 mm / 1.040 mm
<b>Breite außen</b> (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.140 mm
<b>Gesamtbreite des Lifters</b> (Fahrgestell geschlossen)	700 mm
<b>Hubbereich</b>	1.400 mm
<b>Antrieb</b>	24 V LINAK Antrieb
<b>Schutzart</b>	IP X4

## Zubehör / Optionen

<b>Digitale Patientenwaage</b>
<b>Transfurgurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Badegurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Toilettengurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen M-XL)
<b>Ersatzakku 24 V</b>
<b>Externes Wandladegerät</b>

**REHATRONIK**  
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6  
 A-3352 St. Peter/Au  
 T +43 (0)7477 44288  
 F +43 (0)7477 44588  
 E office@rehatronik.at  
 www.rehatronik.at  
 www.pflegeruf.at