



AVERO Motion

Einzigartige Sitz- und Liegebadewanne
mit elektrischer Höhenverstellung und Liegefunktion

Pflegebadewanne AVERO Motion

vereint elegantes Design und einzigartige Funktion ...





Designed by Uwe Spannagel™

Die klaren und weichen Formen der Wanne erinnern an moderne, zeitgemäße Privatbäder und fügen sich vollkommen in das bestehende Wellness- und Badekonzept der Einrichtung ein. Die Funktion wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachkräften aus der Pflege und Therapie optimiert und an die Erfahrungen aus der Praxis angepasst, dies verschafft dem Badenden und dem Pflegepersonal ein Maximum an Sicherheit und Komfort für ein wunderschönes Baderlebnis.



Änderung der Blickrichtung für freie Sicht in den Raum ...

Das einzigartige Wannendesign der AVERO Motion erlaubt eine Änderung der Blickrichtung, so dass Ihr Bewohner beim Baden oder Duschen, ohne störendes Bedienpult, frei in den Raum schauen kann.

Fördert die Mobilität Ihrer Bewohner

Universell einsetzbar ...



Einfacher und sicherer Einstieg ...



Das Konzept der AVERO Motion ist das Baden oder Duschen zu vereinfachen, die Mobilität des Bewohners zu fördern und ihm die Möglichkeit zu geben ein spannendes Vollbad zu nehmen.

Durch die große, seitlich zu öffnende Tür ist es mobilen und teilmobilen Bewohnern möglich selbstständig in die Wanne zu steigen. Gerade noch mobile Bewohner freuen sich auf einen selbstständigen Zugang zu einem Vollbad, ohne den Einsatz eines Hilfsmittels oder der Gefahr beim Einstieg in die Wanne auszurutschen.

Dies erhöht die Akzeptanz und verringert auch ganz entscheidend den Zeitaufwand für den Transfer. Der ergonomische Wanninnenkörper mit dem speziellen Rückenprofil ermöglicht eine optimale Sitz- und Liegeposition für den Badenden. Dies schafft größte Sicherheit und Komfort für den Bewohner.



Für alle Mobilitätsstufen geeignet ...

Wählen Sie das geeignete Hilfsmittel, um Ihren Bewohner sicher und bequem in unsere AVERO Motion zu bringen. Der Wannenrand und der angeformte Sitz bilden keine Barriere für den Bewohner. Die spezielle Formgebung ermöglicht ein optimales Gleiten des Bewohners vom Rollstuhl in die Wanne.

Das Grundgestell ist frei unterfahrbar, somit ist ein Transfer sowohl von einem NORA Aktivlifter als auch durch einen CARLO Tuchlifter möglich. Durch die elektrische Höhenverstellung der Wanne kann die Einstiegshöhe so weit abgesenkt werden, dass ein selbstständiger Transfer vom Rollstuhl möglich ist.

Für Schwerpflegebedürftige ist sowohl ein Transfer mit einem mobilen Tuchlifter als auch mit einem Deckenlifter möglich. Sowohl breite Schlaufenbügel als auch spezielle Vier-Punkt-Gurtbügel, die an mobilen oder an Deckenliftern vorhanden sein können, sind bei der AVERO Motion einsetzbar und sorgen für größte Sicherheit und Komfort.



Maximales Platzangebot

für kleinere und größere Bewohner ...

Bei der Entwicklung der AVERO Motion wurde darauf geachtet, dass die Wanne genügend Platz und Komfort auch für größere, schwerere Bewohner bietet ...

Maximales Platzangebot

Im Vergleich zu vielen anderen Badewannen verfügt die AVERO Motion gerade im Gesäß- und Schulterbereich über deutlich mehr Platz für größere Bewohner. Das neu entwickelte Innenprofil der Wanne bietet zudem eine große und komfortable Liegefläche sowohl für größere als auch für kleinere Bewohner.


Die ergonomische Innenform und der häusliche Charakter der Wannenform bieten insgesamt einen beschützenden Charakter für den Badenden und erhöhen dadurch deutlich das Wohlbefinden.




Komfortabler Innenraum mit viel Platz im Schulter- und Gesäßbereich

Geringer Platzbedarf

Die Abmessungen der AVERO Motion sind deutlich kleiner als bei einer herkömmlichen Pflegebadewanne. Man spart bis zu 50 cm Platz im Vergleich zu einer üblichen höhenverstellbaren Wanne ohne dass die Wanneninnenmaße für den Badenden kleiner werden. Sie können die Wanne dabei frei im Raum aufstellen. Eine Änderung der Blickrichtung für die freie Sicht des Bewohners im Raum ist bei der AVERO Motion problemlos möglich.

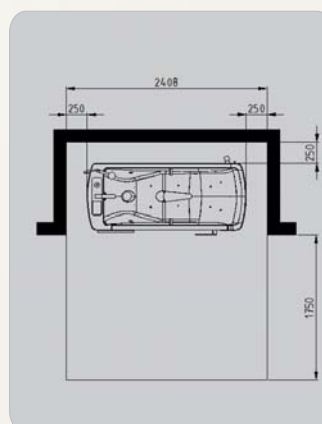

Platzbedarf Nischenposition

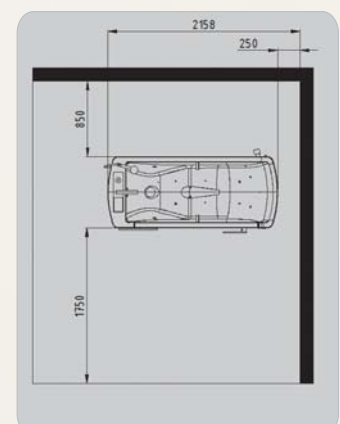

Platzbedarf Inselposition

Die optimale Lösung für Ihre Pflegekraft und Ihren Bewohner ...

Die AVERO Motion Sitz- und Liegebadewanne bietet sowohl Ihrem Bewohner als auch Ihrer Pflegekraft jederzeit ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...

Vorteile Bewohner

- ❑ Ergonomischer Fußraum für optimale Abstützung
- ❑ Angepasstes Sitz- und Liegeprofil für mehr Sicherheit gegen Wegrutschen
- ❑ Langes Innenprofil auch für große Bewohner
- ❑ Änderung der Blickrichtung in den Raum möglich, ohne störendes Bedienpult
- ❑ Ergo-Handgriffe = optimaler Halt für den Badenden
- ❑ Angenehme Innenbreite für schwergewichtige Bewohner
- ❑ Überlauf bis zu 5 cm höher als Wettbewerbswannen = Badewasser bis zur Brust
- ❑ Keine Kanten im Türbereich = einfacher Transfer mit Rollstuhl
- ❑ Sitzfläche mit Hygieneöffnung für bessere Hygiene im Intimbereich
- ❑ Großes Vorfüllvolumen mit 98 l = Bewohner liegt beim Zurückschwenken der Wanne sofort im warmen Wasser
- ❑ Kabelfernbedienung als Bedienoption für den Bewohner
- ❑ Verbrühschutz für Wanneneinlauf und Handbrause



Vorteile Pflegekraft

- ❑ Schnelle Wannenföüllung von 66 l pro Minute
- ❑ Automatische Vorfüüllung (optional)
- ❑ Schnelle Wannenenentleerung von 75 l pro Minute
- ❑ Elektrische Höhenverstellung (bis zu 20 cm) für optimale Arbeitshöhe
- ❑ Bedienfolie mit allen Funktionen
- ❑ Handbrause am Wannennrand immer griffbereit, kein Wasser auf dem Boden
- ❑ Handschalter: Auf/Ab, Neigefunktion, Wasser und Handbrause (optional)
- ❑ Integrierte Desinfektion mit Sperrfunktion (optional)
- ❑ Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen der Türe
- ❑ Verbrühschutz für Wanneneinlauf und Handbrause
- ❑ Temperaturanzeige Wanneneinlauf, Handbrause und Badewasser



Optionen AVERO Motion

Wellness und Therapie ...

Ein Vollbad wirkt sich wohltuend auf den Körper und den Geist aus. Nach neuesten Untersuchungen aus der Demenzforschung zeigen insbesondere sensorische Impulse bei den dementen Bewohnern therapeutische Wirkung ...



Farblichttherapiesystem ...



Das Farblichttherapiesystem der AVERO Motion erzeugt eine besondere, optisch stimulierende Wohlfühlatmosphäre für Ihren Bewohner. Mit den im Fußbereich integrierten LED-Scheinwerfern kann das Badewasser, ohne Wärmeabstrahlung und störenden Blendeffekt für den Bewohner, in das gesamte Farbspektrum getaucht werden. Das Farblichttherapiesystem verfügt über eine frei wählbare Farbauswahl sowie ein automatisches Ablaufprogramm für Farbverläufe.



Luftperlbad ...

Das Luftperlbad mit seiner reinigenden und belebenden Wirkung bietet eine angenehme Massagewirkung und wirkt besonders wohltuend auf den Bewohner. Das leichte Prickeln auf der Haut sorgt für Entspannung und Beruhigung, besonders bei unruhigen Pflegebedürftigen und fördert die Durchblutung der Haut. Eine Verkeimung der in den Wannenboden und Fußbereich integrierten Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich, somit ist der Einsatz einer integrierten Desinfektionsanlage zur Desinfektion des Luftperlbades nicht notwendig.



Musiksoundsystem ...

Durch zwei im Oberkörperbereich integrierte Schwinglautsprecher werden die Schwingungen der Musik direkt ins Wasser und auf den Körper des Bewohners übertragen. Dadurch entsteht ein fühlbares Klangerlebnis, welches nach Stand der neuesten Forschung einen positiven Einfluss auf den Badenden hat. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von individuellen Musikdateien nach Ihren Wünschen. Die Bedienung erfolgt über eine drahtlose Fernbedienung.

Bei der Farbgebung unserer AVERO Motion Sitz- und Liegebadewanne können Sie selbstverständlich frei aus einer Vielzahl von RAL-Farben wählen. Fragen Sie auch nach unserer Kabelfernbedienung als Bedienoption für Ihren Bewohner ...



Aromatherapiesystem ...

Ein im Wannenkörper integriertes Aromatherapiesystem ermöglicht die Anwendung von verschiedenen Aromen die, zusammen mit der angewärmten Luft durch das Luftperlbadsystem und dem Badewasser, für den Bewohner ein wunderschönes Sinneserlebnis entfalten. Eine einfache Bedienung und ein wartungsfreies System sind selbstverständlich. Diese Option ist nur in Verbindung mit dem Luftperlbadsystem möglich.



Automatische Wannenfüllung ...

Die automatische Wannenfüllung ermöglicht das selbstständige Vorfüllen des Fußbereichs mit bis zu 98 Liter Wasser. Dies bietet zum Einen den Vorteil, dass der Bewohner nach dem Schließen der Türe und dem Zurückschwenken der Wanne sofort im warmen Wasser liegt und zum Anderen bedeutet diese Option auch eine deutliche Zeitersparnis für die Pflegekraft, die dann dem Bewohner zugute kommen kann.



Desinfektionseinrichtung ...

Die eingebaute Desinfektion bietet maximalen Schutz gegen Kreuzinfektionen und erlaubt die Verwendung geeigneter, zugelassener, hauseigener Flächendesinfektionsmittelkonzentrate. Der Desinfektionsbehälter ist durch einen verschließbaren Deckel gesichert im Fußgestell der Wanne untergebracht und kann problemlos gewechselt werden.

Leistungsmerkmale AVERO Motion

Ihre Vorteile für sicheres Baden und Duschen ...



Designed by Uwe Spannagel™



- 1 Türverschluss mit zusätzlicher Sicherheitsverriegelung für maximale Sicherheit.



- 2 Die extra große Türöffnung erleichtert sowohl den Einstieg mit mobilen Liftern als auch den Selbsteinstieg.



- 3 Großzügiger Fußbereich mit einem Vorfüllvolumen von 98 l sowie verchromte Messinghaltetriffe für sicheren Halt beim Baden.



- 4 Die niedrige Einstiegshöhe von nur 49 cm ermöglicht einen einfachen Selbsteinstieg auch vom Rollstuhl aus.



- 5 Durch das frei unterfahrbare Fußgestell ist ein Transfer sowohl mit einem Aktivlifter als auch mit einem Tuchlifter möglich.



- 6 Freie Sicht Ihres Bewohners in den Raum, da die Wanne kein Pult hat.



- 7 Bedienfolie mit allen Funktionen.



- 8 Ergonomisches Sitz- und Rückenprofil mit Hygieneöffnung für bessere Pflege im Intimbereich.



- 9 Ausreichend Platz im Oberkörperbereich besonders für größere Personen.

Technische Daten AVERO Motion

Wannenlänge (Einstiegsposition / Liegeposition)	1.760 mm / 1.908 mm
Wannenbreite (außen)	860 mm
Niedrigste Einstiegshöhe	490 mm
Arbeitshöhe	810/1.010 mm
Neigungswinkel	23°
Wannenentleerung (Liter/min.)	75 l/min
Stromanschluß	230 Volt, 50 Hz
Patientengewicht (max.)	210 kg
Füllmenge (ohne Bewohner / mit Bewohner)	ca. 270 l / ca. 185 l
Vorfüllvolumen (Fußbereich)	98 l

Zubehör / Optionen

Kabelfernbedienung als Bedioption für den Bewohner
Automatischer Wasserstopp
Desinfektionseinrichtung
Luftperlbad
Farblicht-Therapiesystem
Musik-Soundsystem
Aroma-Therapiesystem
Komfort-Nackenkissen
Zweiter Halter für Handbrause
Notfunktion bei Stromausfall
Sonderfarbe nach RAL



Kirchengasse 6
A-3352 St. Peter/Au
T +43 (0)7477 44288
F +43 (0)7477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at