



## AVERO Premium plus

Die ideale Wellness- und Pflegebadewanne

# AVERO Premium plus

Die optimale Lösung für ihre Pflegekraft und Bewohner ...





## Wannenkörper mit abgesenktem Fußbereich ...

Unsere Avero Premium plus ist von drei Seiten frei unterfahrbar. Dies ermöglicht das problemlose Arbeiten mit Badeliftern selbst in kleinsten Räumen. Ohne Bodenverankerung steht die Wanne sicher im Raum und kann optimal an ihr Pflegebad angepasst werden. Der Wannenkörper und der Fußbereich der AVERO Premium plus ermöglichen den Einsatz aller im Markt befindlichen modernen Pflegelifter. Der ergonomisch gesenkte Beinbereich und das speziell angepasste Rückenprofil des Wannenkörpers, mit den ausgeprägten Armauflagen, bilden eine abgestimmte ergonomische Wanneninnenform, die dem Bewohner ein entspannendes Wohlfühlbad ermöglicht. Darüber hinaus, ist der Sitzbereich des Wannenkörpers mit einer großen Hygieneöffnung versehen, die eine einfache Reinigung des Intimbereichs erlaubt.



# AVERO Premium plus

Sicherheit und Komfort beim Baden ...

Sperrfunktion Desinfektion

Digitale Temperaturanzeige für Handbrause

Digitale Temperaturanzeige für Wanneneinlauf

Digitale Temperaturanzeige für Badewasser

Auswahl zwischen zwei Füllhöhen

3/4" Thermostat mit Verbrühschutz






## Vorteile für ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- Einfache Bedienung über Bedienfolie
- Sicherheitsmodule verhindern Fehlbedienung
- Porenfreie Oberfläche für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Ergonomisches Arbeiten durch Höhenverstellung der Wanne
- Ergonomischer Wanneninnenkörper ermöglicht bequemes und sicheres Baden des Bewohners mit und ohne Lifter
- Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
- Angeformter Sitz mit Pflegeöffnung für bessere Hygiene im Intimbereich
- Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf
- Große Schulterfreiheit für den Bewohner
- Für alle üblichen Lifter geeignet



# Optionen AVERO Premium plus

Wellness und Therapie ...

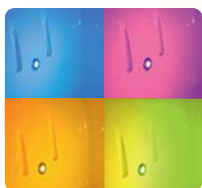

## Farblichttherapiesystem ...

Mit vier seitlich im Wannenkörper eingebauten LED-Spots kann das Badewasser, ohne Wärmeabstrahlung und störenden Blendeffekt für den Bewohner, in das gesamte Farbspektrum getaucht werden. Das Farblichttherapiesystem verfügt über eine frei wählbare Farbauswahl sowie ein automatisches Ablaufprogramm für Farbverläufe.



## Luftperlbad ...

Das Luftperlbad mit seiner reinigenden und belebenden Wirkung bietet eine angenehme Massagewirkung und wirkt besonders wohltuend auf den Bewohner. Eine Verkeimung der integrierten Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich, somit ist der Einsatz einer integrierten Desinfektionsanlage zur Desinfektion des Luftperlbades nicht notwendig.



## Musiksoundsystem ...

Durch zwei im Oberkörperbereich integrierte Schalldruckschwinger werden die Schwingungen der Musik direkt ins Wasser und auf den Körper des Bewohners übertragen. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von individuellen Musikdateien nach ihren Wünschen.



## Aromatherapiesystem ...

Ein im Wannenkörper integriertes Aromatherapiesystem ermöglicht die Anwendung von verschiedenen Aromen die, zusammen mit der angewärmten Luft durch das Luftperlbadsystem und dem Badewasser, für den Bewohner ein wunderschönes Sinneserlebnis entfalten. Diese Option ist nur in Verbindung mit dem Luftperlbadsystem möglich.



## Automatische Wannenfüllung ...

Genießen sie die Möglichkeit durch einen automatischen Wannenfüllstopp die Wanne zu befüllen, um sich während der Befüllung der Wanne ganz dem Bewohner zu widmen. Die Füllhöhe ist frei wählbar und wird einmalig festgelegt. Sie können jederzeit nach dem Füllstopp, durch Drücken der Taste, die Wanne weiter befüllen.



## Desinfektionseinrichtung ...

Die eingebaute Desinfektion bietet maximalen Schutz gegen Kreuzinfektionen und erlaubt die Verwendung geeigneter, zugelassener, hauseigener Flächendesinfektionsmittelkonzentrate. Die Desinfektionsbrause und der Behälter sind zusätzlich gegen Fehlbedienung gesichert.

## Technische Daten AVERO Premium plus

Gesamtmaß AVERO Premium plus 190 (inkl. Bedienpult)	2.230 mm x 820 mm
Wanneninnenkörper AVERO Premium plus 190 (L x B x T)	1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm
Wannenaußenkörper AVERO Premium plus 190 (L x B x T)	1.934 mm x 800 mm x 520 mm
Höhenverstellung	662 mm - 1.062 mm
Hubkraft	10.000 N
Max. Patientengewicht	220 kg
SWL	300 kg

## Zubehör / Optionen

Automatischer Wasserstopp
Wannenverkürzer
Desinfektionseinrichtung
Sperrfunktion Desinfektionseinrichtung
Temperaturanzeige für Badewasser
Doppelter Verbrühschutz
Luftperlbad
Farblicht-Therapiesystem
Musik-Soundsystem
Aroma-Therapiesystem
Notfunktion bei Stromausfall

**REHATRONIK**  
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6  
 A-3352 St. Peter/Au  
 T +43 (0)7477 44288  
 F +43 (0)7477 44588  
 E office@rehatronik.at  
 www.rehatronik.at  
 www.pflegeruf.at