

beka 
hospitec



SENTA PUR L

Der Kombibadelifter zum Baden und Duschen

Kombibadelifter SENTA PUR L

Die ideale Lösung zum Baden und Duschen ...



Passt in jede moderne Pflegebadewanne ...



Der SENTA PUR L Dusch- und Badelifter ist genau das richtige Hilfsmittel, um jederzeit, abhängig von der Mobilität Ihres Bewohners, in der Lage zu sein den Hilfsbedürftigen sicher und komfortabel zu duschen oder zu baden. Der SENTA PUR L ist ein äußerst wendiger und leicht zu fahrender Lifter, der flexibel und in jeder vorhandenen Pflegebadewanne eingesetzt werden kann.

Durch den akkubetriebenen elektrischen Antrieb erfolgt die Höhenverstellung stufenlos und somit für den Bewohner ohne Angstgefühle. Mit der dazugehörigen Handfernbedienung ist der Lifter durch nur eine Pflegekraft einfach und sicher zu bedienen.

Jeder Lifter hat serienmäßig einen Schutz gegen Überlastung sowie einen Auf-fahrerschutz. Ein integriertes Servicemodul meldet Störungen am Lifter sowie fällige Wartungen. Ein manueller Notablass ist selbstverständlich integriert.



Problemlos erweiterbar zum Liegelifter ...

Der SENTA PUR L Badelifter kann einfach und schnell durch die optionalen Liegeliftmodule zu einem vollwertigen Liegelifter erweitert werden. Jeder Sitz ist standardmäßig dafür vorbereitet, dass eine Pflegekraft allein in der Lage ist, ohne Kraftanstrengung, die Seitenflügel einzuhängen. Dies verschafft Ihnen die notwendige Flexibilität die erforderlich ist ohne, dass Sie einen zweiten Lifter bereitstellen müssen. Die Sitzfläche ist mit einer großen Pflegeöffnung ausgestattet, die bei Bedarf mit einer Abdeckung geschlossen werden kann.

Flexibel einsetzbar - auch für die Übernahme vom Bett. Angepasst an Ihren Pflegeablauf können Sie mit unserem Dusch- und Badelifter Ihren Bewohner auch direkt am Bett abholen. Das tiefe Fahrgestell erlaubt das Unterfahren des Pflegebettes und die einfache Übernahme aus dem Bett. Natürlich kann Ihr Bewohner auch selbst auf dem Sitz Platz nehmen. Das Fahrgestell ist so geformt, dass dies ohne Behinderung der Beine und Fersen möglich ist.



Kombibadelifter SENTA PUR L

Bietet höchste Qualität und Komfort ...



Bietet eine Vielzahl an Optionen ...



Integrierte geeichte Patientenwaage. Ein wichtiger Faktor in der heutigen Pflegedokumentation ist die Feststellung und Überwachung des Gewichtes des Bewohners. Hier bietet unser SENTA PUR L Lifter mit integrierter Patientenwaage die ideale Voraussetzung, um den Bewohner zu wiegen ohne, dass ein weiterer Transfer notwendig ist.

Liege liftmodule mit optionaler Fußstütze. Zwei abnehmbare Liege liftmodule erweitern den Sitzlifter problemlos zu einem kompletten Liege lifter. Die Module lassen sich mit einem Sicherheitsklicksystem einfach an den vorhandenen Sicherheitsadapter des Sitzkorbers einklicken. Optional können Sie auch zusätzlich eine einsteckbare Fußstütze erhalten.

Seitengitter. Ein optionales Seitengitter gibt Ihrem Bewohner zusätzlichen Halt und Sicherheit. Die Halterung befindet sich unter dem Sitz und kann bei Nichtbenutzung des Seitengitters wieder unter den Sitz geschoben werden.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Einfache Bedienung durch nur eine Pflegekraft
- ❑ Elektrische Höhenverstellung mit Notablasssystem
- ❑ Flexibles System als Sitz- und Liegelifter einsetzbar
- ❑ Passt in jede moderne Pflegebadwanne
- ❑ Hohe Sicherheit durch Haltesysteme
- ❑ Hautfreundliche Auflagen aus PUR-Material
- ❑ Sicherer Transfer in und aus der Wanne
- ❑ Problemloser Selbsteinstieg möglich
- ❑ Service- und Störungsanzeige
- ❑ Materialien aus Edelstahl und Aluminium
- ❑ Geschlossene, leicht fahrbare Doppellenkrollen
- ❑ Handbedienteil mit optischer Anzeige des Akkuladezustandes
- ❑ Akku und Ladegerät passen zu allen mobilen BEKA Hospitec Liftern



Leistungsmerkmale SENTA PUR L

Ihre Vorteile für sicheres Baden und Duschen ...

Für alle modernen Pflegebadewannen geeignet, elektrisch höhenverstellbar, große Pflegeöffnung, erweiterbar zum Liegelifter, abklappbarer Akku, speziell designtes Fahrgestell, leicht fahrbare Doppellenkrollen, manueller Notablass, ergonomische Fahrgriffe, viele Optionen ...



1 Das Fahrgestell aus hochwertigem Stahl ist so geformt, dass es einen selbstständigen Einstieg ermöglicht.



2 Handbedienung mit Störungs- und Serviceanzeige sowie permanenter Anzeige des Akkuladestandes.



3 Akku seitlich abklappbar für schmale Türen.



4 Geschlossene, leicht fahrbare Doppellenkrollen, 2 davon bremsbar.





5 **Optional:** Digitale Patientenwaage, geeicht.



6 **Optional:** Digitale Patientenwaage, nicht geeicht.



7 Sitzfläche mit großer, verschließbarer Pflegeöffnung.



7




8 **Optional:** In die Halterung am Sitz einsteckbares Seitengitter mit Sicherheitsverschluss.



9 **Optional:** Halter für Steckbecken zur Aufnahme Ihres hauseigenen Steckbeckens.



4

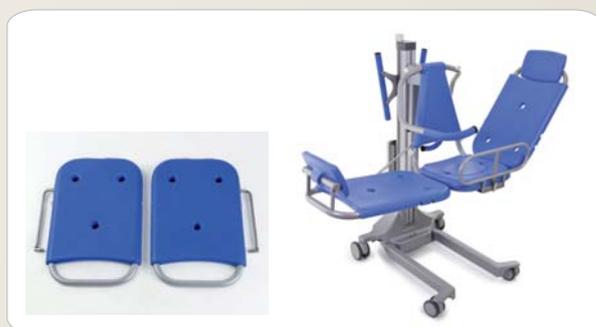

10 **Optional:** Zwei abnehmbare Liegelifflügel erweitern den Sitzlifter mühelos zu einem kompletten Liegelifter. Die 2 Module lassen sich problemlos an den Sicherheitsadapter des Sitzkorbs einklicken. Optional auch mit einer Fußstütze.



11 Die PUR-Auflage wird einfach auf den Edelstahlrahmen aufgeschoben und ist jederzeit abnehmbar.

Technische Daten SENTA PUR L

Max. Patientengewicht	150 kg
Hubhöhe	475 mm - 1.175 mm
Hub	700 mm
Länge	860 mm
Breite	718 mm
Höhe	1.375 mm
2 Doppelaufrollen (vorne)	Durchmesser 100 mm
2 Doppelaufrollen (hinten, mit Feststeller)	Durchmesser 125 mm
Akku (abklappbar)	24 V
Netzausschalter und Notabsenkung	

Zubehör / Optionen

Digitale Patientenwaage
Liege- und Rollstuhlmodule (2 Stück)
Zusätzlicher Haltegriff für Badelifter
Seitengitter
Fußstütze
Steckbeckenhalter
Ersatzakku
Externe Wandladestation

REHATRONIK
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6
 A-3352 St. Peter/Au
 T +43 (0)7477 44288
 F +43 (0)7477 44588
 E office@rehatronik.at
 www.rehatronik.at
 www.pflegeruf.at