

AVERO VIVA plus



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Produktvideo
ansehen!



Zahlreiche Vorteile für Pflegekraft und Badende.

Die AVERO VIVA plus verfügt über zahlreiche Funktionen & Optionen, die ein sicheres Baderlebnis ermöglichen: Angefangen von der modernen Bedienfolie, die neben den Funktionen der Hubbadewanne, auch 3 digitale Temperaturanzeigen für Badewasser, Wanneneinlauf und Handbrause bietet, über die Funktionssperre bis hin zur automatischen Wasserspülung der Wannenzuläufe.

Das smarte und zeitlose Design ermöglicht die Option der Blickrichtungsänderung. AVERO VIVA plus kann mit allen modernen Bade- und Personenliftern unterfahren werden und bietet einen der größten Hubbereiche auf dem Markt!





Großer Hubbereich von 400 mm mit min. Arbeitshöhe = 683 mm und max. Arbeitshöhe = 1.083 mm



Optional: Serviceschalter zur thermischen Legionellenspülung* Deaktivierung des elektr. Verbrühschutzes durch Schließzylinder

**abhängig von bauseitiger Heißwasserversorgung*



Bedienfeld mit allen Funktionen und Temperaturanzeigen für Wanneinlauf, Badewasser und Handbrause



Optional: Desinfektionseinrichtung



Funktionssperre aller Funktionen mittels Sensorschaltung (andere Sperrvarianten optional verfügbar)



Optional: Intuitive Kabelfernbedienung mit Symbolen für alle Funktionen

✓ Bedienfeld mit 3-fach digitaler Temperaturanzeige

Temperaturanzeigen für: Wassereinlauf • Badewasser • Handbrause

✓ Funktionensperre via Sensorschaltung

Die Pflegebadewanne ist standardmäßig mit einer automatischen Funktionssperre via Sensorschaltung ausgestattet. Optional kann die Funktionssperre auch mittels Tastenkombination oder Schließzylindersystem erfolgen.

✓ Automatische Wasserspülung bei Nichtbenutzung von Wanneinlauf und Handbrause

Bei Wanneneinlauf und Handbrause findet automatisch 48 Stunden nach jeweiliger Benutzung eine Wasserspülung zur Vorbeugung von Legionellenbildung statt. Auf Wunsch wird die Wanne ohne diese Einstellung geliefert.

✓ Optionale Blickrichtungsänderung

Das smarte Design ermöglicht ein problemloses Drehen der Pflegebadewanne, sodass der Badende frei in den Raum blicken kann.

✓ Großer Hubbereich von 400 mm

Die AVERO VIVA plus bietet einen der größten Hubbereiche auf dem Markt. Mit 400 mm Höhenverstellbarkeit haben Pflegekräfte optimalen Spielraum die Arbeitshöhe der Pflegebadewanne ergonomisch anpassen zu können.

✓ Optionaler Serviceschalter zur thermischen Legionellenspülung

Mittels Schließzylinder lässt sich der elektronische Verbühschutz deaktivieren. So können Servicekräfte bei Bedarf eine manuelle Legionellenspülung durchführen.

✓ Vielzahl an Wellness-Optionen

Die AVERO VIVA plus kann mit allen BEKA Hospitec Wellness-Optionen ausgestattet werden: Musik-Sound-System, Farblight-System, Airspa-System und Aroma-System.

Sensitive Wahrnehmung und Entspannung Ihrer Bewohner fördern!

Mit unseren hochwertigen Wellness-Optionen.



Farblicht-System

In den Wannenkörper eingebaute LED-Scheinwerfer ermöglichen ein angenehmes Lichterlebnis. Die freie Wahl der Farbgebung sowie ein automatisches Lichtprogramm lassen keine Wünsche offen!

Luftperlbad

Mit der Option Luftperlbad können Ihre Bewohner ein Wellnessbad mit Massagewirkung genießen. Das sehr angenehme Prickeln auf der Haut sorgt für Entspannung und fördert die Durchblutung. Eine Verkeimung der Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich und somit ist der Einsatz einer internen Desinfektionsanlage nicht notwendig.




Aroma-System

Zusammen mit der Option Luftperlbad bietet das Aroma-System ein wahres Sinneserlebnis für Badende. Verschiedene Aromen entfalten sich im Badewasser. Eine einfache Bedienung und ein wartungsfreies System sind selbstverständlich. (Diese Option ist nur in Verbindung mit der Option Luftperlbad möglich).



Musik-Soundsystem

Mit dem Musik-Soundsystem genießen Bewohner ein fühlbares Klangerlebnis während des Badens. Über eine Bluetooth Verbindung, erfolgt eine individuelle Musikauswahl nach Ihren Vorstellungen.

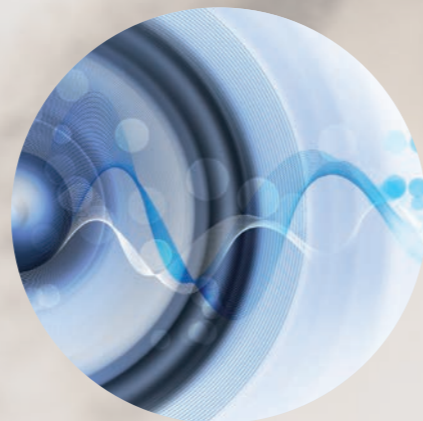

Technische Daten

Gesamtmaß inkl. Bedienpult	2.025 mm - 786 mm
Innenbreite Oberkörper	706 mm
Hubhöhe	683 mm - 1.083 mm
SWL	400 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz

Produkteigenschaften

Elektrische Höhenverstellung mit großem Hubbereich von 400 mm
Ergonomischer Wanneninnekörper
Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
Automatische Wannenfällung
Automatische Funktionssperre via Sensorschaltung
Automatische Wasserspülung von Wanneneinlauf und Handbrause (48 Stunden nach Benutzung)
Bedienfolie mit digitaler Temperaturanzeige für Badewasser, Handbrause und Einlauf

Verfügbare Optionen

- | | |
|--|--|
|  Aroma-System |  Wannverkürzer |
|  Farblicht-System |  Änderung der Blickrichtung |
|  Luftperlbad |  Kabelfernbedienung |
|  Bluetooth Musik-Soundsystem |  Automatische Funktionssperre via Tastenkombination |
|  Sonderfarbe nach RAL |  Automatische Funktionssperre via Schließzylinder |
|  Desinfektionseinrichtung |  Serviceschalter thermische Legionellenspülung |
|  Notfunktion bei Stromausfall | |



Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de