


# CARLO Aiu, Classic 185



**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

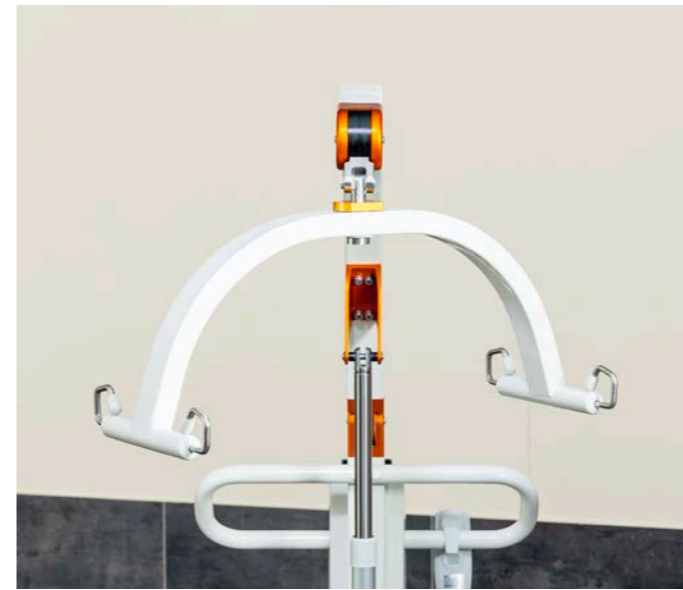

Produktvideo  
ansehen!

## Ein zuverlässiger Passivlifter für Ihre Bewohner.

Unser mobiler Gurtlifter CARLO Alu, Classic 185, unterstützt Ihr Pflegepersonal optimal bei allen täglichen Hebe- und Transferrouniten und ermöglicht jederzeit ein ergonomisches, sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belastung des Bewegungsapparates durch manuelles Heben und Umlagern des Bewohners.

Der Auslegearm mit 4-Punkt-Schlaufenbügel lässt sich mittels Handbedienteil bis zum Boden absenken und gewährleistet dadurch eine sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch nur eine Pflegekraft. Das Fahrgestell lässt sich elektrisch spreizen und bietet somit einen hohen Bedienkomfort. Aufgrund der geringen Höhe des Fahrgestells können mit dem CARLO Alu, Modell Classic 185, problemlos sowohl Badewannen als auch Pflegebetten unterfahren werden.

-   
 Gruppe 3
-   
 Gruppe 4
-   
 Gruppe 5



## Stabiler 4-Punkt-Schlaufenbügel

Der Gurtbügel des CARLO Alu, Classic 185 ist für alle Schlaufengurte geeignet und besitzt einen Sicherheitsverschlussmechanismus für die Gurtaufnahme. Der Abstand zwischen dem Aufnahmebügel und der Hubsäule ist groß, sodass Bewohner während des Transfers ausreichend Platz haben.



## Anti-Rotationsmechanismus

Der Anti-Rotationsmechanismus (ARM) verhindert unangenehme Pendel- oder Rotationsbewegungen während des Hebens und dem Transfer.



## Zum Baden und Duschen geeignet

Der Passivlifter ist dank der Verwendung von hochwertigem Aluminium uneingeschränkt im Badezimmer nutzbar – Sowohl zum Duschen als auch Baden Ihrer Bewohner. Die extrem leichte Bauweise ermöglicht ein leichtes Manövrieren ohne Kraftaufwand. Bei uns erhalten Sie die passenden (Bade-) Gurte.

## Technische Daten

Fahrgestell ( L x H )	1.290 mm x 125 mm
Breite innen ( geschlossen/gespreizt )	540 mm / 1.040 mm
Breite außen ( geschlossen/gespreizt )	700 mm / 1.180 mm
Hub	1.400 mm
SWL	185 kg

## Produkteigenschaften

Leichte Aluminium-Bauweise
Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes
4-Punkt-Schlaufenbügel mit Sicherheitsverschlussmechanismus
Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
Anti-Rotationsmechanismus (ARM)

## Verfügbare Optionen



Ersatzakku 24 V



Wandladegerät



Digitale Patientenwaage

## Verfügbare Schlaufengurte



Transfurgurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Hochwertiges Nylonmaterial



Toilettengurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Armpolster



Badegurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Hochwertiges Nylon-Netzmaterial



Softgurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Atmungsaktives Nylon-/ Baumwollgemisch



**REHATRONIK**  
Technik für Menschen **GMBH**

Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E [office@rehatronik.at](mailto:office@rehatronik.at)  
[www.rehatronik.at](http://www.rehatronik.at)  
[www.pflegeruf.at](http://www.pflegeruf.at)

**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

**BEKA Hospitec GmbH** | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen  
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail [info@beka-hospitec.de](mailto:info@beka-hospitec.de)  
[www.beka-hospitec.de](http://www.beka-hospitec.de)

