

INVITA



beka

**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

Produktvideo  
ansehen!



## Smarte Kombi-Lösung in kompaktem Design.

Die INVITA Sitz- und Duschbadewanne bietet ein einmaliges Konzept für eine Kombination aus Baden und sicherem Duschen. Zum einen wird durch eine unübertroffene, ergonomische Sitzposition ein Abgleiten des Bewohners während des Duschens verhindert und zum anderen hat der Bewohner durch das Zurückschwenken der Wanne auch die Möglichkeit ein angenehmes Vollbad zu nehmen.

Die Wanne fördert die Selbstständigkeit und bewahrt durch die Möglichkeit des Selbsteinstiegs in die Wanne die Würde des Bewohners. Durch die seitlichen Griffe wird der sichere Einstieg unterstützt und zusätzlich gibt der waagerechte Fußbereich den notwendigen Halt. Natürlich können auch Patientenlifter für den Transfer in die Wanne eingesetzt werden.





Große Haltegriffe zum sicheren Ein- und Aussteigen



Kompakte Bauweise sorgt für geringen Platzbedarf der Wanne



Fernbedienung zur einfachen Neigeverstellung



Spezieller Ablauf sorgt für überdurchschnittlich schnelle Wannentleerung




Optional: Luftperlbild mit durchblutungsfördernder Massagewirkung



Sitzfläche mit extra großer Hygieneöffnung



Absolut sichere Sitz- und Liegeposition ohne Gefahr des Abgleitens

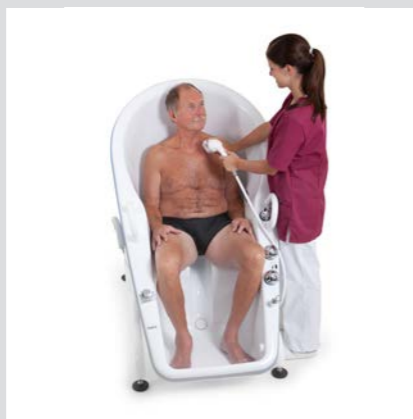

Großzügiger Oberkörperbereich für genügend Platz beim Abduschen



Die stufenlose, elektrische Neigefunktion bringt den Bewohner in Badeposition



## Ideal für kleine Raumkonzepte

Die kompakte Form der INVITA bietet auch in begrenzten Räumen eine zuverlässige und sichere Option Ihre Bewohner sowohl Duschen als auch Baden zu können.



## Einmalige Kombination aus Duschen und Baden

Der sichere Sitz ohne Gefahr des Wegrutschens bietet ideale Duschverhältnisse für Pflegekraft und Bewohner. Gleichzeitig kann durch Zurückschwenken der Wanne ein angenehmes und vollwertiges Vollbad angeboten werden.



## Möglichkeit des sicheren Selbsteinstiegs

Der waagerechte Fußbereich mit Anti-Rutsch-Beleg sowie die großen Haltegriffe am Wannenrand ermöglichen Bewohnern sicher und gefahrlos in die Pflegewanne einzusteigen. Das damit verbundene Gefühl der Selbstständigkeit und Aufrechterhaltung der eigenen Mobilität, fördert das Wohlbefinden Ihrer Bewohner immens und bietet einen würdevollen Pflegeansatz.



## Technische Daten

Gesamtmaß ( L x B )	1.565 mm x 845 mm
Höhe Badeposition	920 mm
Höhe Duschposition	1.280 mm
Neigungswinkel	23°
Füllmenge	ca. 80-120 Liter
Gewicht ohne Verpackung	ca. 90 kg
SWL	325 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz

## Produkteigenschaften

Stufenlose, elektrische Neigeverstellung
Fernbedienung für die Neigeverstellung
Sicherheitsmodule verhindern Fehlbedienung der Wanne
Geringer Wasserverbrauch und schnelle Entleerungszeit
Ergonomischer Wanninnenkörper für sicheren Halt
Kompaktes Design, geringer Platzbedarf
Schlüssellochform des Wannenkörpers bietet viel Freiraum im Oberkörperbereich
Sitzfläche mit großer Hygieneöffnung
Ohne Lifter einsetzbar
Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf

## Verfügbare Optionen



Luftperlbad



Sonderfarbe nach RAL



Bedienknöpfe zur Neigeverstellung am Wannrand



Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E [office@rehatronik.at](mailto:office@rehatronik.at)  
[www.rehatronik.at](http://www.rehatronik.at)  
[www.pflegeruf.at](http://www.pflegeruf.at)

**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

**BEKA Hospitec GmbH** | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen  
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail [info@beka-hospitec.de](mailto:info@beka-hospitec.de)  
[www.beka-hospitec.de](http://www.beka-hospitec.de)

