

SENTA PUR L




beka DIFFERENT
BY DESIGN



Produktvideo
ansehen!



Mit den optionalen Liegelifftmodulen ist SENTA PUR L auch mit unseren Mobilitätsgruppen 4 und 5 kompatibel.

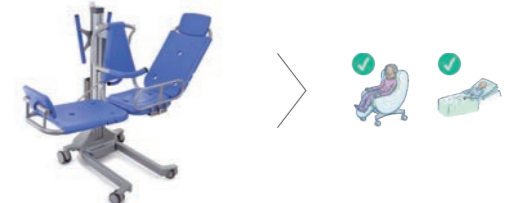

Das perfekte Hilfsmittel für Transfer- und Badevorgänge!

Der SENTA PUR L Kombibadelifter ist genau das richtige Hilfsmittel, um jederzeit, abhängig von der Mobilität Ihres Bewohners, in der Lage zu sein den Hilfsbedürftigen sicher und komfortabel zu Baden.

Dank der optionalen Liegelifftmodule ist der SENTA-Sitzlifter problemlos zum Liegelifter erweiterbar. Der SENTA PUR L ist ein äußerst wendiger und leicht zu fahrender Lifter, der flexibel und in jeder modernen Pflegebadewanne eingesetzt werden kann. Durch den akkubetriebenen elektrischen Antrieb erfolgt die Höhenverstellung stufenlos und somit für den Bewohner ohne Angstgefühle. Mit der dazugehörigen Handfernbedienung ist der Lifter durch nur eine Pflegekraft einfach und sicher zu bedienen.





Selbstständiger Einstieg möglich



Handbedienung mit Anzeige des Akkuladestandes



Sitzfläche mit großer, verschließbarer Pflegeöffnung



Liegeflöftmodule mit optionaler Fußstütze



Leicht fahrbare Doppelrollen, zwei davon bremsbar und feststellbar



Optional: Seitengitter zum Einstecken am Sitz mit Sicherheitsverschluss



Optional: Digitale Patientenwaage



Abnehmbare PUR-Auflage für einfache Reinigung



Optional: Halter zur Aufnahme von Steckbecken

✓ Kombibadelifter mit Sitz- und Liegefunktion

Mit dem SENTA PUR L können Pflegekräfte Hilfsbedürftige jederzeit, abhängig von der Mobilität der Bewohner, komfortabel transferieren und baden. Der Kombibadelifter ist dabei höchst flexibel einsetzbar und eignet sich sowohl für die Übernahme vom Pflegebett, als auch für den selbstständigen Einstieg Ihrer Bewohner.

✓ Im Handumdrehen zum Liegelifter erweiterbar

Durch die optionalen Liegeflöftmodule kann der SENTA PUR L problemlos zum Liegelifter erweitert werden. Die zwei Liegeflöft-Komponenten lassen sich einfach und schnell durch nur eine Pflegekraft einhängen. Dies schafft große Flexibilität, ohne einen zweiten Lifter zur Verfügung stellen zu müssen.

✓ Große Pflegeöffnung & abnehmbare PUR-Auflage

Die Sitzfläche des SENTA PUR L bietet eine große Pflegeöffnung, die sich bei Bedarf einfach mit einer Abdeckung verschließen lässt. Die abnehmbare PUR-Auflage ermöglicht eine einfache Reinigung.

✓ Für alle modernen Pflegebadewannen geeignet

Der Badelifter eignet sich für den Einsatz mit allen modernen Pflegebadewannen.











Technische Daten

Gesamtmaß (L x B x H)	940 x 718 x 1.375 mm
Hub	700 mm
Niedrigste Einstiegshöhe	475 mm
SWL	150 kg
Doppelrollen 2 x vorne	100 mm Durchmesser
Doppelrollen 2 x hinten (mit Feststeller)	125 mm Durchmesser
Akku	24 V

Produkteigenschaften

Elektrisch höhenverstellbar
Notablasssystem
Hochwertige, abnehmbare PUR-Auflagen
Geschlossene Doppelrollen
Handbedienung mit Anzeige des Akkuladestatus
Materialien aus Edelstahl und Aluminium

Verfügbare Optionen

-  Ersatzakku 24 V
-  Wandladegerät
-  Digitale Patientenwaage
-  Liegelifftmodule
-  Seitengitter
-  Fußstütze (Liegelifftmodul)
-  Steckbeckenhalter
-  Zusätzlicher Haltegriff (Liegelifftmodul)



Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de